

JOBST® Elvarex®



Prendas de compresión terapéutica, a medida,
de tejido plano para el tratamiento de la patología linfática

JOBST® Elvarex®

**... indispensable en el
tratamiento del linfedema**

JOBST®
Comfort, Health and Style!



JOBST® Elvarex®: más de 50 años de experiencia

Terapia reconocida

Durante más de 50 años, **BSN-JOBST®** ha producido con éxito prendas terapéuticas de compresión en tejido plano.

Y eso ha sido gracias al alto nivel de innovación de la compañía. Hoy, las prendas **JOBST® Elvarex®** forman parte del estándar de tratamiento de la terapia de compresión para linfedema. La amplia gama de productos permite que éstos se adapten de manera individualizada a las necesidades de cada paciente, desde guantes de mano hasta guantes de pie.

■ Amplia gama terapéutica

JOBST® Elvarex® ofrece productos individualizados para extremidad superior e inferior en todos los modelos posibles: desde guantes de mano hasta guantes de pie.

■ Óptima adaptación

Debido a la variabilidad en el tricotado que nos ofrecen las prendas de tejido plano, **JOBST® Elvarex®** garantiza una adaptación óptima a la anatomía del paciente.

■ Confortable de usar

La permeabilidad y la transpiración del tejido hacen que sea comfortable para la piel y ayudan al paciente en el cumplimiento diario.

■ Uso terapéutico

JOBST® Elvarex® es la recomendación terapéutica para el tratamiento del linfedema y lipedema, así como para sus formas mixtas.



JOBST® Elvarex®: da color a la vida

JOBST® Elvarex®, garantiza un alto grado de cumplimiento del paciente gracias a su eficacia terapéutica y al excelente confort que proporciona.

Con tres nuevos colores para extremidades inferiores y dos para extremidades superiores, estas medias de compresión de tejido plano aseguran ir bien vestido cada día y para cada ocasión. La amplia gama de colores permite poder combinar y coordinar las prendas con la ropa.



JOBST® Elvarex®: para todas las ocasiones

Los nuevos colores de **JOBST® Elvarex®** están disponibles en todas las compresiones.

CCL	Colores			CCL	Colores	
1-4 super	azul oscuro	marrón oscuro	gris	1-2 forte	Cranberry	beige oscuro

Los nuevos colores se adaptan a todos tus estilos. Para ir a la moda, ser elegante y moderna en cada momento y poder combinarlos con toda tu ropa.

Además de los tres nuevos colores para extremidad inferior y de los dos para extremidad superior, **JOBST® Elvarex®** sigue estando disponible en los colores clásicos, beige, caramelo y negro.

¡Protección solar incluida!



Otra de las ventajas que ofrece la gama de prendas de compresión **JOBST® Elvarex®** es su protección solar.


El tejido **JOBST® Elvarex®** ofrece un factor de protección UV de 80 según el estándar UV 801.



JOBST® Elvarex®: las características que nos diferencian

Las diferencias

Prendas de tejido plano

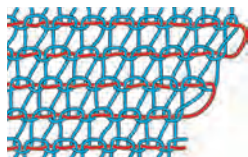


Las prendas de tejido plano se caracterizan por estar tejidas con un número variable de agujas, dispuestas en línea y se convierte en un producto acabado al unir los extremos mediante una costura.

La adaptación individualizada y la compresión óptima se consiguen aumentando o disminuyendo el número de puntadas.

El tratamiento de los edemas extremos se garantiza con el uso de prendas de tejido plano.

Prendas de tejido circular

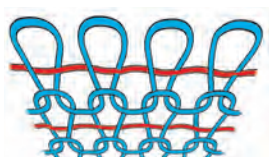

Las prendas de tejido circular se caracterizan por estar tejidas sin costuras y con un número fijo de agujas.

Los diferentes tamaños de las circunferencias, desde el tobillo hasta el muslo, se tejen con el mismo número de puntadas.

La forma anatómica se consigue al variar el tamaño de la puntada y la tensión del hilo, aunque sólo puede variar de forma limitada.

Las prendas de compresión de tejido plano tienen el mismo dibujo por la cara interna y externa; la firmeza del tejido hace que no se introduzca en los pliegues de la piel y que no tenga tendencia a enrollarse. Las constricciones se evitan con las prendas de tejido plano (importante en los casos de los pacientes con linfedema).

Determinados modelos y opciones, así como guantes para manos y pies, sólo pueden confeccionarse en tejido plano. Por otra parte, opciones como bolsillos, adaptaciones anatómicas, oberturas etc. sólo son posibles de confeccionar en prendas de tejido plano.

Además las prendas de tejido plano pueden adaptarse individualmente a las medidas de cada paciente debido al número variable de puntadas.



Máquinas de tejido plano en la planta de producción de **BSN-JOBST**™ en Emmerich

JOBST® Elvarex®: máximo confort



Alto nivel de confort, asegura aceptación y cumplimiento

Fácil de colocar


- Mínimo esfuerzo para poner y quitar la prenda comprobado bajo control de laboratorio.

Algodón: puramente natural


- El uso de algodón reduce potencialmente las alergias y es confortable para la piel.
- Óptima absorción y transpiración.

Transpirable, gracias a su estructura de malla

- El poro abierto del tejido de **JOBST® Elvarex®** favorece un alto nivel de permeabilidad.
- Disminuye la sensación de calor, asegurándonos mantener la piel en óptimas condiciones.
- Su estructura de malla en forma de ondas hace que el tejido ejerza un efecto micro-masaje sobre la piel cuando se mueve la extremidad*.

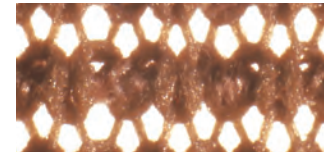

JOBST® Elvarex®

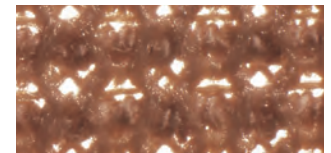

Tejido plano de otras marcas

* Földi, E.: Linfedema - Novedades en la terapia; Video de formación científico médica: Beiersdorf AG, Hamburgo JOBST GmbH, Emmerich; 1999.

JOBST® Elvarex®: la compresión que funciona

Incrementando la eficacia, mayor fiabilidad terapéutica

No solo mantener, sino optimizar




- **JOBST® Elvarex®** no sólo garantiza los resultados de descongestión, además proporciona una mejora continua.
- Movilización del edema y mejora el drenaje linfático**.
- Retorno venoso prolongado.
- Alto ratio de presión de trabajo contra presión de reposo.

Alto grado de fiabilidad para un tratamiento terapéutico óptimo

- Gradiente de compresión de distal a proximal.
- Adaptación anatómica óptima gracias a la técnica de tricotado plano y su confección a medida.



Test de compresión (HOSY) en **BSN-JOBST®**

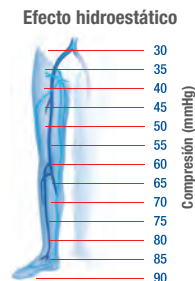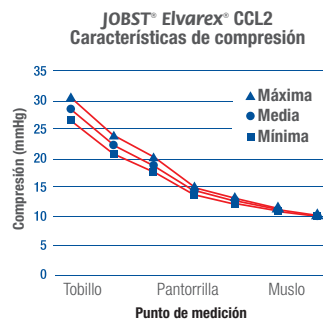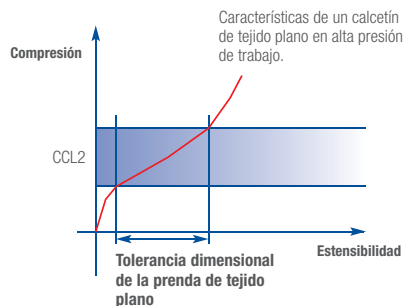

**Häfner, H.-M., Jünger: Hämodynamische Wirksamkeit unterschiedlicher Kompressionsstrümpfe bei Patienten mit chronischer venöser Insuffizienz. *vasomed*, 12. Jahrgang; 4/2000.

JOBST® Elvarex® Indispensable en el tratamiento del linfedema









- **Compresión terapéutica eficaz**
- **Confortable y fácil de colocar**
- **Efecto micro-masaje**
- **Tratamiento individualizado**

JOBST® Elvarex®: la gama

■ **Extremidad superior. Clases de compresión y colores:**

Extremidad superior (punto C)	mmHg
Elvarex® 1 - CCL1	15 - 21 mmHg
Elvarex® 2 - CCL2	23 - 32 mmHg
Elvarex® 2 forte - CCL2F	23 - 32 mmHg

Extremidad superior	Colores				
Elvarex® 1 CCL1	beige	negro	caramelo	cranberry	beige oscuro
Elvarex® 2 CCL2	beige	negro	caramelo	cranberry	beige oscuro
Elvarex® 2 forte CCL2F	beige	negro	caramelo	cranberry	beige oscuro







						
	AC ¹	AE	CG	AG	CH	AH
Guante sin dedos						
Guante sin dedos / con pulgar						
Guante con dedos						
Bolsillo						
Borde inclinado						
Adaptación anatómica en codo						
Tira al sujetador con velcro						
Sujeción con banda						
Banda silicona de 2,5 cm superior						
Banda silicona de 5 cm superior						
Banda silicona de 2,5 cm o 5 cm interior						
Banda silicona de 2,5 cm o 5 cm interior ^{3/4}						
Cremallera						

JOBST® Elvarex®: la gama

■ Extremidad inferior. Clases de compresión y colores:

Extremidad inferior (punto B)	mmHg
Elvarex® 1 - CCL1	18 - 21 mmHg
Elvarex® 2 - CCL2	23 - 32 mmHg
Elvarex® 3 - CCL3	34 - 36 mmHg
Elvarex® 3 forte - CCL3F	40 - 46 mmHg
Elvarex® 4 - CCL4	49 - 70 mmHg
Elvarex® 4 super - CCL4S	60 - 90 mmHg

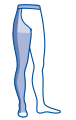Extremidad inferior	Colores				
Elvarex® 1 CCL1	beige	negro	azul oscuro	marrón oscuro	gris
Elvarex® 2 CCL2	beige	negro	azul oscuro	marrón oscuro	gris
Elvarex® 3 CCL3	beige	negro	azul oscuro	marrón oscuro	gris
Elvarex® 3 forte CCL3F	beige	negro	azul oscuro	marrón oscuro	gris
Elvarex® 4 CCL4	beige	negro	azul oscuro	marrón oscuro	gris
Elvarex® 4 super CCL4S	beige	negro	azul oscuro	marrón oscuro	gris

						
	AD	AG	AG-T	AG-HT	AT	CG
Dedos abiertos						
Dedos cerrados						
Pie borde inclinado						
Almohadillado						
Elvarex® T						
Cremallera						
Adaptación anatómica en rodilla						
Banda silicona de 2,5 cm superior/interior						
Banda silicona de 2,5 cm interior ³ / ₄						
Banda silicona de 5 cm superior						
Banda de 5 cm interior/interior ³ / ₄						
Cinturilla regulable						
Corte francés						
Premamá						
Abertura frontal (masculino)						
Comfort zone						